



ALL RIGHTS RESERVED
**PATENT
PENDING**
ALL RIGHTS RESERVED



reddot award 2015
winner

Invacare® | **Action® 5**

O ajuste perfeito ao seu
estilo de vida

Trusted Solutions,
Passionate People



A cadeira *Invacare Action5* foi concebida para utilizadores ativos que procuram uma cadeira de preço acessível, com boa performance na condução e facilmente encartável, facilitando o manuseamento, armazenamento e transporte. Com duas patentes registadas e uma construção ultraleve, é uma cadeira de confiança. As características incluem:

- **Mecanismo de encarte único**
- **Estabilidade de uma cadeira rígida**
- **Ajustabilidade simples e rápida**
- **Inúmeras opções de configuração**



Mecanismo de encarte único

- O design inovador da cadeira reduz o tamanho do chassi e permite ao encosto rebater sobre o assento tornando-a compacta.
- Não requer manuseamento adicional para ser encartada, podendo ser armazenada e transportada sem esforço.



Estabilidade de uma cadeira rígida

- O sistema de encarte horizontal em H, patenteado, proporciona um nível de estabilidade superior ao das outras cadeiras encartáveis no mercado.
- A função de autobloqueio garante a segurança na posição de sentado e permite que a cadeira possa ser impulsionada quase sem esforço, melhorando a performance na condução.

Ajuste a cadeira com o utilizador sentado

- A nossa tecnologia única, patenteada, permite ajustar o ângulo do encosto enquanto o utilizador permanece na cadeira.
- A ajustabilidade **simplificada** facilita e agiliza ajustes e inclusão de acessórios, garantindo a personalização perfeita para cada utilizador.
- A **escala** incorporada permite uma regulação mais precisa do ângulo do encosto.



Personalize

- Liberdade para o utilizador ajustar o design à sua personalidade, podendo escolher entre uma variedade de cores.
- A **Action5** pode ser configurada mediante as necessidades específicas do utilizador, que pode desde logo optar por um look mais ativo com o chassi fixo, ou pela **versão com apoios de pernas rebativeis**, que facilita ainda mais o encarte e o transporte.
- Nas duas páginas seguintes detalhamos o leque de opções disponíveis para a **Action5**
- A **Action5** é também compatível com outros produtos Invacare, incluindo **os produtos Alber**.



Uma cadeira premiada

- Desde já uma cadeira vencedora, a **Invacare Action⁵** recebeu um prémio Red Dot na categoria de Design de Produto.
- O Prémio Red Dot é não só a maior competição de produtos do mundo, mas também uma das mais prestigiadas distinções na área do design.



reddot award 2015
winner




Configurações



Assento ajustável em tensão e profundidade

Ajustes realizados através de tiras de velcro de fácil utilização.

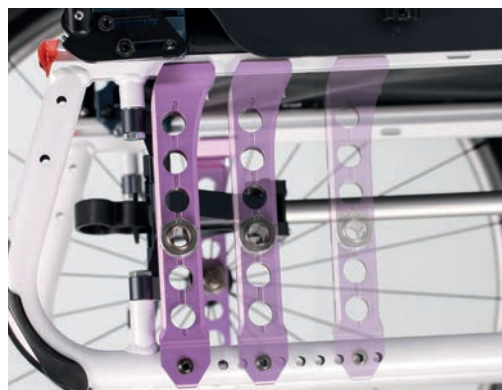

Centro de gravidade

São possíveis ajustes do centro de gravidade até 100mm, através de incrementos de 25mm que podem ser aperfeiçoados até 12mm.



Ângulo de rodas / Camber

Ajustes standard de 0-2°; disponível com a opção de 3° e 4°, se solicitado.

Opções de Apoios de Pernas



Apoios de pernas rebatíveis

Permitem que os apoios de pernas rebatem para o exterior ou para debaixo do assento.



Chassis frontal fixo

O chassis frontal fixo a 80° está disponível para utilizadores mais independentes.



Diferentes opções de apoios de pernas

Escolha entre apoios de pernas a 70°, 80° ou 90°, apoios elevatórios ou para amputados.

Acessórios



Capa para encosto

Inclui bolsa traseira e faixa refletora para melhor visibilidade.



Rodas anti-volteio ativas

Podem ser acionadas pelo utilizador ou pelo cuidador.



Rodas dianteiras

Uma variedade de rodas, entre 4" e 7", incluindo a elegante opção softroll em alumínio.

Características



Protector de roupa com rebordo

Elegantes e leves, permitindo reduzir ao mínimo o peso total da cadeira.



Apoio de braços standard ajustável em altura

Ajustável também em profundidade, deslizando na calha do assento.



Apoio de braços para Hemiplégico

Este apoio opcional proporciona conforto adicional ao utilizador, permitindo ajustes de altura, profundidade e ângulo.

Novo apoio de braços rebatível e removível



Novo apoio de braços rebatível e removível

Acessível ao utilizador, removível para facilitar transferências.



Ajuste de altura

Pressione o botão e facilmente efetue os ajustes necessários.



Alavanca de desbloqueio

Mesmo com mobilidade manual reduzida, o apoio de braços pode ser facilmente destravado e removido para trás.



Posição rebatida

O parafuso de ajuste do apoio de braço permite que o mesmo fique na área de fácil de acesso, quando rebatido.



A posição da almofada de apoio de braços pode ser revertida facilmente, permitindo um braço de cadeira longo ou curto.

Características Técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Largura do assento	Profundidade do assento	Ângulo do assento	Altura do assento	Ângulo do encosto	Altura do encosto	Ângulo do chassis dianteiro
<i>Invacare Action⁵</i>	305 / 330 / 355 / 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 530 mm	350 / 375 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm	0 - 9 °	Frontal 360-535 mm em incrementos de 25 mm Traseira 360-510 mm em incrementos de 25 mm	Fixo a 90° Ou ajustável a 90°, -15° à +15°	Fixo a 300 / 325 / 350 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm Ajustável a 360 - 400 mm e 410 - 490 mm	Chassi fixo 80° Ap. pernas rebat 70° / 80° / 90° Apoio de pernas elevatório 0-80°


	Comprimento dos apoios de pernas	Altura do apoio de braços	Largura total	Largura total encartada	Comprimento total incluindo o apoio de pernas	Comprimento total sem o apoio de pernas	Altura total
<i>Invacare Action⁵</i>	Chassi ap. pernas rebat.: 200-510 mm Chassi front. fixo: 300-530 mm	186-227 mm 186-266 mm 205-280 mm	Largura assento +160 mm a +250 mm	320 -380 mm	845 -1205 mm	670 -860 mm	701 -1108 mm

	Max. inclinação	Raio	Peso max. utilizador	Peso total	Peso da parte mais pesada
<i>Invacare Action⁵</i>	7°	1050 - 1380 mm	100 & 130 kg	A partir de 12,3 kg	A partir de 8,3 kg



Este produto foi testado e medido de acordo com a EN 12183:2014. As dimensões podem apresentar variações de 15mm/2°. Adicionalmente, as nossas cadeiras de rodas obedecem aos standards da ISO 7176:2008 e ISO 10542, possuindo ainda características que proporcionam níveis superiores de segurança em viagens em veículos motorizados. Não obstante, os utilizadores de cadeiras de rodas devem ser transferidos para os assentos do veículo e usar os respectivos sistemas de retenção sempre que tal seja possível. Para mais informações acerca desta cadeira, consulte a página www.invacare.eu.com. Para informações acerca do tipo de utilizador, utilização pretendida, ajustes e transporte, por favor consulte o guia do utilizador.

Cores do Chassis

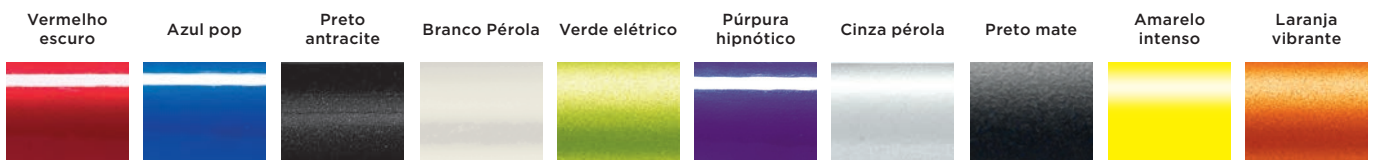

Estofos

Nylon preto
Malha cinza



Cor de Detalhes

Prata

Azul

Púrpura



Podem existir ligeiras diferenças em relação às cores apresentadas