

matrx[®]
SEATING SERIES

Libra[®]



Conforto superior com elevado nível de
proteção e posicionamento

INVACARE[®]
Yes, you can.[®]

- Otimização da combinação de diferentes materias - uma base de espuma anatômica com uma bolsa de fluído no topo providencia o mais elevado nível de proteção da pele, posicionamento e personalização às necessidades de cada utilizador
- Nova bolsa de fluído de dupla camada com recurso à tecnologia **Invacare Flo-tech™** para uma eficaz gestão da forças de cisalhamento e re-distribuição da pressão
- Especial contorno anatômico fornece equilíbrio e estabilidade à pélvis, otimizando a função corporal nas atividades diárias
- Leve e livre de manutenção.



Design único

- Base de espuma - contorno anatômico para otimizar o suporte e posicionamento da pélvis
- Espuma durável de alta resiliência, incluindo proteção Ultra-Fresh™ - anti-microbiana e anti-odores
- Bolsa de fluído - dupla camada com compartimentos segmentados para máxima proteção ao redor das proeminências ósseas.



Benefícios funcionais

- Suporte pré-isquial previne o deslizamento sobre a almofada, reduzindo a ocorrência de forças de cisalhamento
- Depressão (cavidade) trocantérica promove nivelamento da pélvis para maior estabilidade lateral
- Prolongamento radial posterior da almofada, ajuda a prevenir a basculação posterior da pélvis
- Recorte do término anterior da almofada, acomoda músculos isquiotibiais encurtados e facilita a propulsão com os pés.
- Posicionamento confortável dos membros inferiores na linha média, devido ao perfeito equilíbrio do contorno anatômico de abdução e adução.

Leve e fiável

- O fluído da bolsa não é sensível à temperatura, nem necessita de manutenção nem de ajustes.
- Devido às propriedades únicas, o fluído da bolsa automaticamente equilibra-se em redor das estruturas anatómicas, não necessitando de ajustes nem manutenção.
- Para necessidades complexas de posicionamento, um conjunto de acessórios está disponível para personalização.

Características e Opções



Superfície anatômica

Superfície aumentada para superior re-distribuição da pressão.



Re-distribuição da pressão

O peso transferido da pélvis para as coxas, reduz a pressão nas áreas de maior risco.



Imersão


As proeminências ósseas imergem confortavelmente na bolsa de fluído para ótima proteção.



Redução das forças de cisalhamento

O design único permite o movimento controlado da pélvis sem deslocamento.

Características e Opções

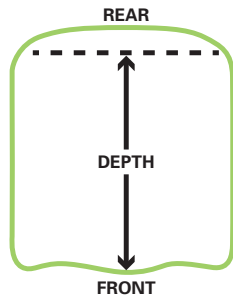

Recorte anterior

Para casos com isquiotibiais encurtados ou propulsão com os pés.

Tamanho da almofada

A profundidade da almofada é medida na face lateral.

Extensão radial posterior

Uma extensão radial de 38 mm maximiza a superfície de contacto e minimiza o espaço entre o assento e o encosto. Estabiliza o fluido em posições de basculação e o recorte ao nível do cóccix, potencia o alívio da pressão.



Cunha anterior

Aumenta o declive para basculação, previne deslizamento e reduz forças de cisalhamento.

Recorte anterior com cunha

Para casos com limitações da flexão da articulação coxo-femural, ou alturas assento-chão reduzidas para propulsão com os pés.



Cunha lateral anterior

Para promover suporte para adução.

Cunha posterior

Para casos com rotação e obliquidade pélvica.



Cunha lateral

Reforça a estabilidade lateral para melhor posicionamento na linha média.

Saco de fluido suplementar Abdutor

Para protecção mais localizada ou acomodação de obliquidade pélvica. Fixo de forma segura dentro da bolsa de fluido ou sobre a base da espuma.

Para um confortável posicionamento na linha média da anca e perna.

Fecho lateral

Inclui corda para fácil manuseio de utilizadores com tetraplégia.


Tamanhos

Versão Standard em mm:		
largura	x	profundidade
355	x	305
355	x	355
355	x	405
380	x	405
380	x	455
380	x	505
405	x	405
405	x	455
405	x	505
430	x	405
430	x	455
430	x	505
455	x	405
455	x	505
480	x	405
480	x	455
480	x	505
505	x	405
505	x	455
505	x	505

Versão Heavy Duty em mm:		
Width (mm)	x	Depth (mm)
530	x	455
530	x	505
530	x	555
555	x	455
555	x	505
555	x	555

Características Técnicas


Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Peso total	Peso max. utilizador	Temperatura máx. lavagem	Limpeza
Matrx Libra	 1.6 kg	 Std 136 kg HD 227kg	 Capa: 80°	 Interior: com um pano húmido

Opções de Capa

Preto macio

Spacer

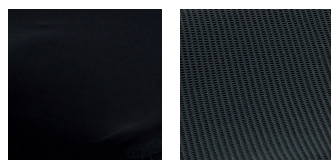

Impermeável a líquidos
Permeável ao vapor