

**rea**

**Dahlia<sup>®</sup>**



Compacta e fácil de manobrar



A Invacare **Rea Dahlia** tem um design elegante, moderno, com basculação e fácil ajustabilidade. Para aqueles que procuram mobilidade com conforto e alívio de pressão, esta cadeira é versátil e perfeita para utilizadores passivos e ativos.

A **Dahlia** tem um ângulo de basculação de 45° que melhora o posicionamento e juntamente com a reclinção reduzem a pressão. A compatibilidade cruzada entre as várias famílias de produto Invacare está disponível bem como a unidade de assento **Flex3**.

## Transferência de peso com suavidade

A basculação de 45° favorece uma excelente redução da pressão, auxiliando o utilizador na proteção das áreas mais vulneráveis. A construção única do sistema de basculação possibilita um movimento muito suave e requer pouca força muscular na sua ativação.



### A cadeira ideal para propulsão com os pés

A altura do assento mínima de 35 cm permite que grande parte dos utilizadores (mesmo os de estatura mais baixa) propulsionem a cadeira com os pés.



A **Dahlia** 45° para propulsão com os pés e altura de assento de 35 cm.



A **Dahlia** possui uma reclinção de encosto muito suave, mantendo o correto suporte postural da cabeça e tronco.



**Dahlia** 45° de basculação e 30° reclinção de encosto - tudo para um bom alívio da pressão.



O Dual Stability System com o ponto de pivot elevado proporciona o mínimo de pressão quando reclinado.

---

## Características chave e benefícios

---



### ◀ Benefícios da Dahlia 45

- Fácil de manobrar com as rodas traseiras próximas do corpo para propulsão facilitada
- Largura total reduzida
- Fácil de manobrar com movimentos leves e ligeiramente basculada
- Compatibilidade cruzada de componentes com a família *Invacare Rea*
- Possível de adaptar assentos moldados ou personalizados



### ◀ Matrx

Os encostos **Matrx** podem ser selecionados como opção. Fornecem estabilidade e alinhamento postural ao corpo do utilizador. O **Matrx Elite Profundo** tem integrado um contorno mais pronunciado, enquanto que o **Matrx Elite** permite maior liberdade de movimentos.



### ◀ Dual Stability System (DSS)

- Dual Stability System (DSS) mantém a estabilidade da cadeira em cada posição de basculação
- Fácil de girar com as rodas traseiras que equilibram o centro de gravidade
- Devido ao ponto de pivot elevado no encosto, existe o mínimo de pressão envolvida durante a reclinção

## Características técnicas ▼

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.




Largura do assento ▼



Profundidade do assento ▼



Altura do assento ▼

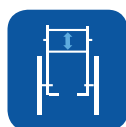

Altura do encosto ▼



Altura do apoio de braços ▼



Comprimento dos apoios de pernas ▼



Ângulo de basculação ▼



Ângulo do encosto ▼

**Rea Dahlia**

390-440/  
440-490/  
490-540  
  
16" (390-490/  
440-540/490-  
590 mm)

430 - 500 mm

350 - 500 mm

500 - 800 mm  
(sem almofada de assento)

250 - 320 mm

330 - 667 mm

0 - 45°

0° - 30°



Largura total ▼



Altura total ▼



Comprimento total incluindo o apoio de pernas ▼



Peso total ▼



Peso max. utilizador ▼



Peso de transporte ▼



Raio de viragem ▼



Crash-test ▼

**Rea Dahlia**

Larg. assento + 30°:  
160 mm (16") 825 - 1250 mm  
  
Larg. assento + 45°:  
180 mm (24") 850 - 1250 mm

900 - 1195 mm

>35kg<sup>1</sup>

Max 135 kg

21/25 kg  
(Larg. assento 390 mm)<sup>2</sup>

755 mm

ISO 7176-19



Inclinação máx. para uso do travão de parque ▼

**Rea Dahlia**

7°

1. Peso total com largura de assento de 39 cm e na configuração mais leve. A opção de basculação elétrica e reclinção adiciona 4,2 kg ao peso de transporte.



## Cor do chassis ▼ Cor das faixas ▼



Preto



Prata



Azul



Champagne



Vermelho



Verde Petróleo

## Estofa do assento ▼



Preto Dartex TR26



Preto plush TR35



Preto spacer TR36

Rea, design Rea e DSS (Dual Stability System) são marcas registadas da Invacare Internacional. A Rea Azalea tem integrado o DSS que proporciona ao utilizador mais estabilidade e segurança quando bascula e reclina a cadeira.



Aceda ao website através do scan do telemóvel.

**Tel.: 225 193 360**  
marketing.pt@invacare.com  
www.invacare.com  
www.invacarerea.com

Invacare Portugal  
Rua da Estrada Velha, 949  
4465-784 Leça do Balio



**Yes, you can.®**



© 2019 Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados. Toda a informação descrita é correta à data de impressão e publicação. A Invacare reserva-se no direito de alterar as especificações de produto sem aviso prévio. Rea Dahlia - PT - 07/2019